

body clock



PROFILE TENS



Innehåll

1. Inställningar av Profile TENS

2. Timer inställning och minne

3. Professionell användning, funktion

4. Vad ingår vid en leverans



1. Inställning av Profile TENS



A. Konstant

B. **Burst 1:** Detta funktion ger 1 Burst var 2:e sekund. Varje bursts består av 80 pulser. Pulsbredd är justerbar och indelad i 25 mikrosekunder. Bredden är från 25 till 250.

C. **Burst II:** Denna funktion ger 2st bursts per sekund. Varje bursts består av 7 pulser och puls bredden är justerbar.

D. **Bred Modulering:** Puls modulation kan göras mellan 25 till 250 mikro sekunder. Förändringen i moduleringen sker upp och ner med ökning av 15. Den stegrar upp i 8 sekunder för att sedan sjunka i 8 sekunder. Frekvensen är justerbar från 1 till 200 pulser per sekund.

E. **Hastighets Modulering:** Frekvensen minskar från 100 pulser/sekund till 20 pulser/sekunder över en tidsperiod på 8 sekunder. Frekvensen ökar därefter från 20 pulser/sekund upp till 100 pulser /sekund på 8 sekunder. Pulsbredden är justerbar.


2. Timer inställning och minne

Timer inställningen består av:

- Kontinuerlig; 10 minuter; 15 minuter; 20 minuter
- 30 minuter; 45 minuter och 60 minuter

• Produkt minnet återkallar inställningarna som användaren brukade vid sista behandlingen.

Profile TENS diagram

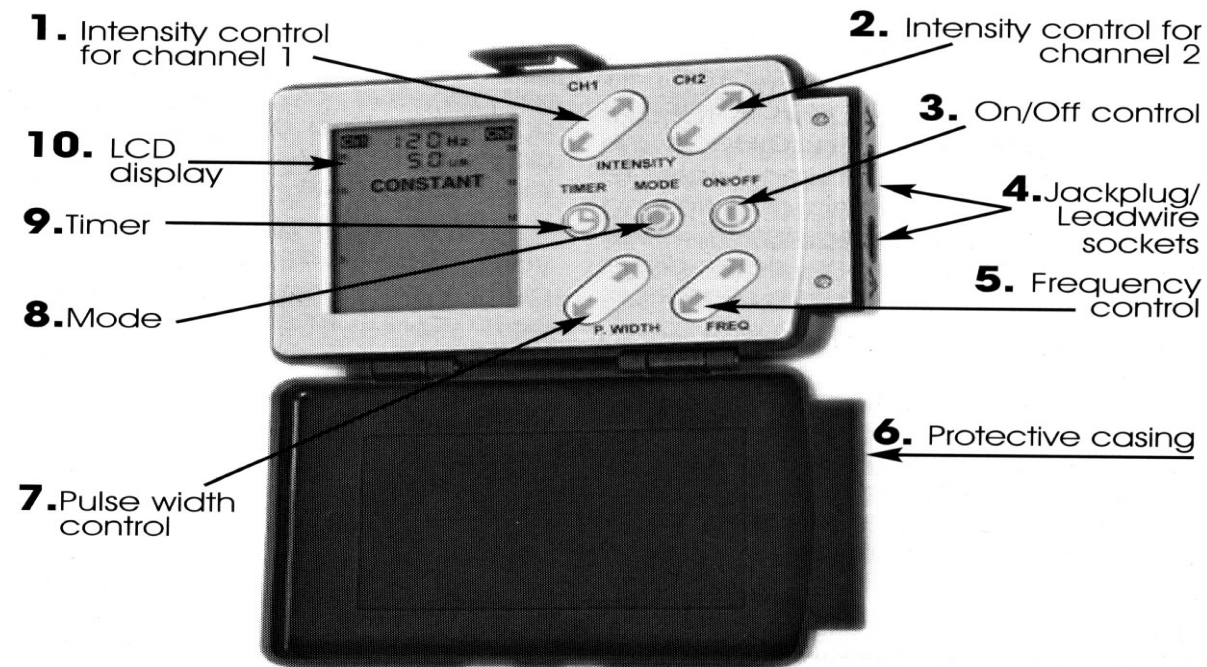

3. Professionell användning, funktion



<u>Inställning</u>	<u>Funktion</u>
Timer and CH1 ↑	Låser inställning på vald parameter
Timer and CH1 ↓	Låser inställning på vald parameter
Timer and CH2 ↑	Visar total brukartid för utrustningen
Timer and CH2 ↓	Nollställer total tid – ger en möjlighet att justera tiden till noll.
Timer and Freq ↑	Kommer ihåg antalet ggr som utrustningen har brukats. (Behövs vara aktiv i 1 minut för att räknas med)
Timer and Freq ↓	Option för att nollställa antalet ggr som utrustningen brukats.



4. Vad ingår vid en leverans

